

# Bayer MICROLET® 2

## Trucs et astuces pour l'application de MICROLET® 2

Les lancettes sont à usage unique : Chaque jour, une couleur différente- avec MICROLET® 2



Retirer l'embout



Tourner le capuchon protecteur d'1/4 de tour et introduisez la lancette



Enlever le capuchon protecteur




Replacer l'embout et sélectionner la profondeur de prélèvement



Positionner et appuyer sur la touche de commande



Enlever l'embout et sécuriser la pointe de la lancette

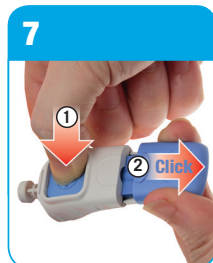

Éjecter la lancette



### Hotline Diabète

Téléphone : 044 465 83 55

Fax : 044 465 82 82

Email : [info@bayerdiabetes.ch](mailto:info@bayerdiabetes.ch)


Internet : [www.diabetes.bayer.ch](http://www.diabetes.bayer.ch)



## CONTOUR® XT lecteur de glycémie et bandelettes CONTOUR® NEXT


## Manuel d'utilisation simplifié

Simple. Précis.

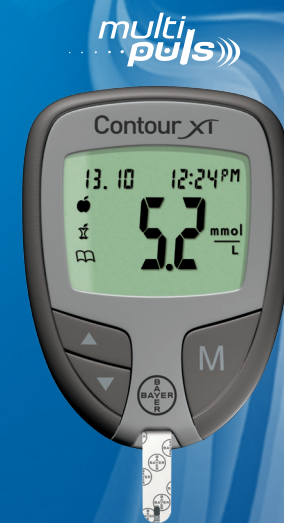


## ETAPE 1 : insérer le capteur

Insérez l'extrémité grise du capteur dans l'orifice du lecteur de glycémie CONTOUR® XT. Le codage de l'appareil s'effectue ainsi automatiquement! Le lecteur se met en marche. Un capteur comportant une goutte de sang clignotante s'affiche à l'écran, indiquant que le lecteur est prêt à mesurer la glycémie.

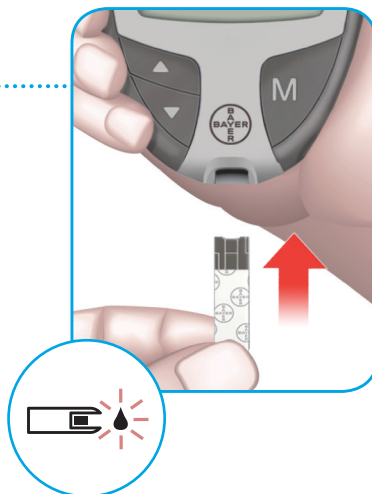


## ETAPE 2 : effectuer le test sanguin

Appliquez l'emplacement de mesure du capteur directement sur la goutte de sang. Le sang est automatiquement aspiré dans le capteur. Maintenez le capteur sur la goutte de sang jusqu'à ce qu'un signal retentisse.

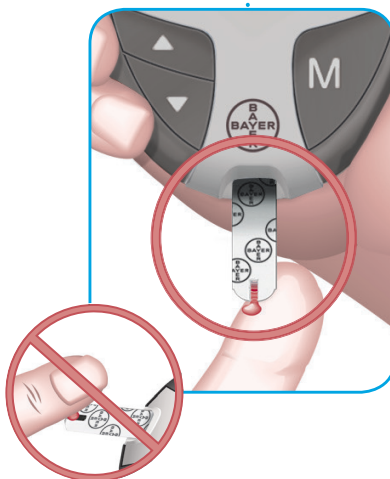


## ETAPE 3 : afficher le résultat du test

Les cinq secondes nécessaires à la mesure commencent à courir après le signal. Le résultat de votre mesure s'affiche ensuite et est automatiquement enregistré.

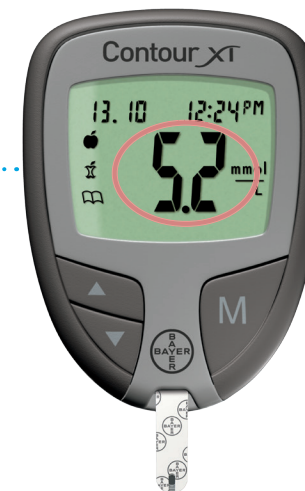

## ETAPE 4 : retirer le capteur

Lorsque vous retirez le capteur utilisé de CONTOUR® XT après la mesure, l'appareil s'arrête automatiquement.

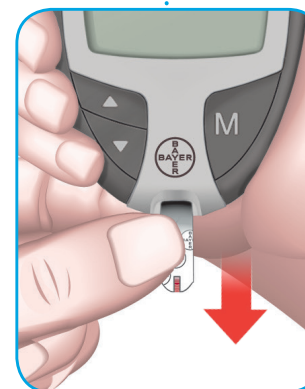

## Capteurs CONTOUR® NEXT

Les capteurs CONTOUR® NEXT sont en vente en boîtes de 50 ou de 100 unités.

